




Köszönjük, hogy az OcClean X fogkefét választotta!

Biztonsági előírások

- * A készülék 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
- * A kefe töltés közben enyhén felmelegszik. Amennyiben a készülék túlmelegedne, fejezze be a töltést és lépjen kapcsolatba egy hivatalos szervizzel.
- * Kizárólag eredeti kiegészítőket és olyan tartalékfejet használjon, melyet ehhez a készülékhez gyártottak.
- * A kefe kizárólag a fogak, a nyelv tisztítására és az íny masszírozására való. Mindenféle más jellegű használat tilos.
- * Higiéniai okokból minden használatnak saját fejjel kell rendelkeznie.
- * A kefe nem kültéri használatra készült, és nem szabad kitenni közvetlen napfénynek.
- * A fogkefét és a hozzá tartozó töltőállomást megfelelően tárolja. A kapcsolatok szennyeződésével való eltömődése a teljesítmény csökkenését, vagy a készülék meghibásodását okozhatja.
- * Szellemi, vagy fizikai értelemben korlátozott személyek a fogkefét csak felelős személy felügyelete alatt használhatják.

Útmutató

- * Az első indítás során a fogkefe automatikusan párosítási üzemmódba kapcsol. Töltse le az OcClean alkalmazást, és fejezze be a párosítást.
- * Keressen a "OcClean app" kifejezésre a Google Play, vagy az App Store áruházban az alkalmazás letöltéséhez. Csatlakoztassa a készülékét az OcClean X kefével és állítsa be saját tisztítási tervét. Ezután, a terv alapján mosson fogat. Ezáltal a felhasználói program mentődik, és ezután már nem kell újra beállítania az alkalmazásban.
- * A fogkefe használata lehetséges az alkalmazáshoz történő csatlakoztatás nélkül is. Amikor bekapcsolja, a "Connect Toothbrush" mondat látható a képernyőn (csatlakoztassa a fogkefét) és a "Skip" opció (kihagyás). A gomb megnyomásával kihagyja a párosítás teljes folyamatát.

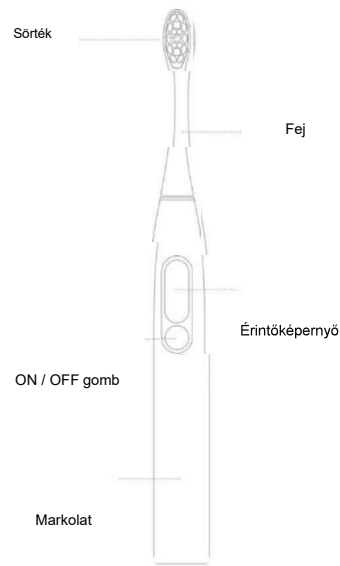


A kefe automatikusan bekapcsol, amikor lecsatlakoztatja a dokkról. Ha több, mint 8 másodpercig nem használja a kefét, energiatakarékos üzemmódba lép.

- A gomb megnyomásával vált a különböző tisztítási programok között. Gyári és felhasználói programok közül is választhat.


A normál tisztítás 2 percig tart. A kefe félpercenként figyelmezteti, hogy ideje más területet tisztítani. A program befejezése után a kefe automatikusan energiatakarékos üzemmódba lép.

- A kefe automatikusan csökkentheti a teljesítményét és a tisztítási intenzitást. Ez megvédi a száját a túlságosan erős tisztítástól. A motor hangjának halkulása a tisztítás során teljesen normális. Ezt a funkciót kikapcsolhatja, vagy átállíthatja a beállításokban.
- A program befejezése után a fogkefe kijelzőjén megjelenik a tisztítás listája. Tudja meg, hogyan tisztíthatja fogait hatékonyan, pontokat, és hasznos tanácsokat fog kapni a következő tisztításhoz. A gyűjtött adatokat diagramon is megtekintheti.

- A kijelzőn felfelé történő suhintással belép a speciális beállításokba. Ezután válthat 4 további üzemmód és 32 különböző tisztítási intenzitás között. Például választhatja a "Whitening mode" (fehéritő) és "Massaging Mode" (masszázs) üzemmódokat. A kefe megjegyzi az Ön választását és a következő tisztítás alkalmával automatikusan azt választja ki.

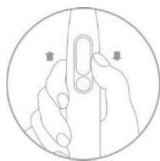

Húzza az ujját le, vagy fel

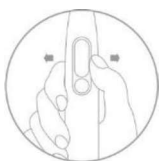

Húzza az ujját balra, vagy jobbra.



Nyomja meg a gombot



- A nap ikon figyelmezteti, hogy az elmúlt 7 napban nem szinkronizálta a keféét az alkalmazással és ezért az aktuális időjárás előrejelzés nem megjeleníthető.



- A Bluetooth ikon azt jelzi, hogy a fogkefe csatlakozott az Oclean alkalmazáshoz.



- Ez az ikon a kijelzőn azt jelzi, új szofverfrissítés áll rendelkezésre, vagy a kefe más fontos értesítést fogadott.



- Az intenzitás értéke megkülönbözteti a kemény, közepes és puha tisztítást. Ez az érték változó és folyamatosan változik a tisztítás során a nyomás ereje és a tisztítás időtartama függvényében.



- Eredményét minden fogmosás után pontokra válthatja. Az összegyűjtött pontok száma a szinkronizálást követően az alkalmazásban jelenik meg. Az alkalmazás nem korlátozza a pontok számát, azonban a kefe maximum három számjegyű számokat jelenít meg. Tehát nem lehetséges több, mint 999 pont gyűjtése az alkalmazással való szinkronizálás nélkül.



Amennyiben ez az ikon jelenik meg a kijelzőn, haladéktalanul töltsd a fogkefét. Várja meg, amíg az akkumulátor teljesen feltöltődik és a kijelzőn "100 %" látható. Az alkalmazásban sok más módon kívül az akkumulátor jelenlegi állapotát is megtalálhatja.


Töltés

Csatlakoztassa a fogkefe alsó részét a töltőállomáshoz. A töltés során a kijelzőn látszik az akkumulátor töltöttségi állapota. A töltés 2,5 órán keresztül tart. Alacsony feszültség, vagy USB-ről való töltés esetén ez az idő 3 óra is lehet.

Javasolt töltő: 5 V/1 A - 5 V/2 A

Fontos információk

Az Oclean X támogatja a gyorsöltést. Az akkumulátor túltöltését nem javasoljuk. Semmi esetre se helyezze a fogkefét a töltőállomásra, amennyiben teljesen feltöltött állapotban van. A fogkefe helyes tárolása érdekében használjon fali tartót.

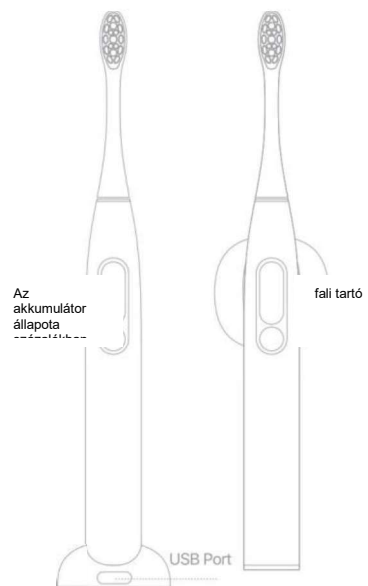

Töltés

Tárolás

Figyelmeztetés

- Ne szerelje szét a készüléket.
- Amennyiben az akkumulátor sérült, ne használja tovább a készüléket.
- Ne tegye ki a készüléket magas hőnek.

5. Ne kapcsolja be a készüléket, ha
folyadék jutott a belsejébe.